

## Nexus

A **Plug-&-Play** Call System  
That Works Right Out Of the Box



## HVORFOR NEXUS ?



### Enkelt

Intuitivt å programmere og bruke. Ikke behov for spesial opplæring



### Pålitelig

Fullt overvåket for tapte signaler og lavt batteri, i samsvar med UL 2560



### Tilkobling

LoRa trådløs teknologi gir pålitelig dekning av større lokasjoner.



### Funksjoner

Integrert nød anrop, baderoms alarm, fall håndtering og vandre alarm.



### Fleksibilitet

Ubegrenset kapasitet på anropspunkter. Et bredt utvalg av sensorer kan kobles til med enkel konfigurasjon



### Sikkerhet

Øyeblikkelig gjenopprettingsløsning i tilfelle uventet maskinvare eller systemfeil



### Sporing

Hendelseslogg med svartidssporing. Data kan eksporteres for analyse- og styringsrapporter.



### Melding

Øyeblikkelig varsling sendes til personalet via Android-app / intern personsøker.



- Anropspanel med stikkontakt som standard for tilkobling av pasienthåndsett.
- Nødanrop kan utløses ved å trykke ringeknappen to ganger på veggenheten.
- Lett å rengjøre.
- Batteridrevet med feilovervåkning.



- Består av en alarmtrekkledning med 2 røde armbånd og en tilbake stillingsknapp.
- Enheten er sprutbestandig og kan brukes i dusjområdet.
- En rød trygghets-LED og en summer bekrefter at det er blitt ringt.
- Feirloversvåking og varsel om lavt batterinivå sørger for at enheten fungerer som den skal.

# Bærbart Håndsett

Rondish



Bærbart håndsett kan festes på en sengeskinne, noe som gir pasienter en måte å ringe etter hjelp mens sengene har blitt trillet bort fra et sengepanel



- Gir visuell indikasjon på anrop som er foretatt i rommet.
- Ekstrautstyr. En innebygd summer for å gi lokal hørbar alarm.
- Anti-kollisjonsteknologien 'lytt før snakk' og kvittering for anrop sikrer at anrop mottas pålitelig.
- Fungerer som en signalforsterker

# Nexus Master Station

Rondish



- Hovedstasjon med berørings skjerm viser med en oversikt en liste over aktive alarmer. Nexus bruker farge (rød / gul / gul) for å indikere prioriteten (viktigheten) av en alarm. Alle samtaler vises i prioritetsrekkefølge. Dette gjør det lettere for deg å bestemme hvor alvorlig en alarm er, og hvilken respons som kreves.



Location	Event	Time	Duration
Mobile Patient John Lennon	Call	30/03/2020 12:05:53	28s
East Wing Bathroom A	Call	30/03/2020 12:05:51	16s
Room A Bed 8	Emergency	30/03/2020 12:05:43	17s
Room B Bed 10	Emergency	30/03/2020 12:06:43	19s
Room C Bed 12	Emergency	29/03/2020 12:08:43	15s
East Wing Bathroom B	Call	29/03/2020 12:10:43	13s
South Wing Bathroom C	Call	29/03/2020 12:12:43	18s
West Wing Bathroom D	Call	29/03/2020 12:14:43	17s
Room E Bed 7	Emergency	28/03/2020 12:16:43	15s
Room A Bed 2	Emergency	28/03/2020 12:18:43	15s
Mobile Patient Kenneth	Call	28/03/2020 12:20:53	20s
Mobile Patient Anthony	Call	28/03/2020 12:22:53	18s

- Nexus samler og lagrer et bredt spekter av informasjon. Data inkluderer samtale typer, samtale plasser, samtale volum, responstid, personalbesøkte poster og mer. Kan eksporteres for analyse og rapportering.
- Rask sikkerhetskopiering og øyeblikkelig gjenopprettingsfunksjoner beskyttet dataene dine og minimerer nedetid i tilfelle strømbrydd.

**Intercom Support AS**

Vestvollveien 30A

2019 Skedsmokorset


Tlf: 22 30 46 46

e-post: [info@intercom-support.no](mailto:info@intercom-support.no)

[www.intercom-support.no](http://www.intercom-support.no)



## NDP-11 Master Station

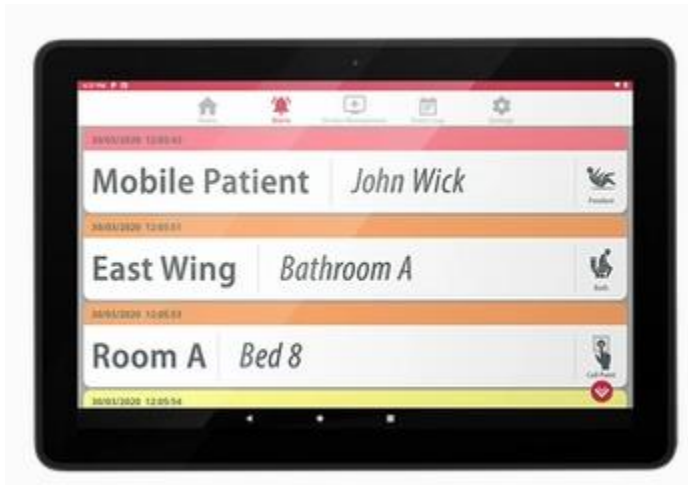

- 10 "berørings skjerm
- Fargeskjerm
- Indikasjon på lydanrop
- Samtaler vises i prioritetsrekkefølge
- Hendelseslogg og svartidssporing
- Varsel om lavt batterinivå
- Passord beskyttet
- Leveres med AC-lader
- Alternativer for veggmontering / bordmontering
- Må tilkobles Rondish Dongle Receiver



- Person søker er lette og passer lett i lommen eller kan festes til et belte. Alle anrop fra sykesignalanlegget kan videresendes til personsøkerne, slik at omsorgspersonalet får anrop, når de ikke er nærheten av et skjermpanel.


# Eksternt display

Rondish



- Dupliserer alle anrop i sanntid til flere steder som korridorer og kantiner. Omsorgspersonell trenger ikke bevege seg langt for å se hvem som ringer

# Smarttelefon (Ikke tilgjengelig enda)

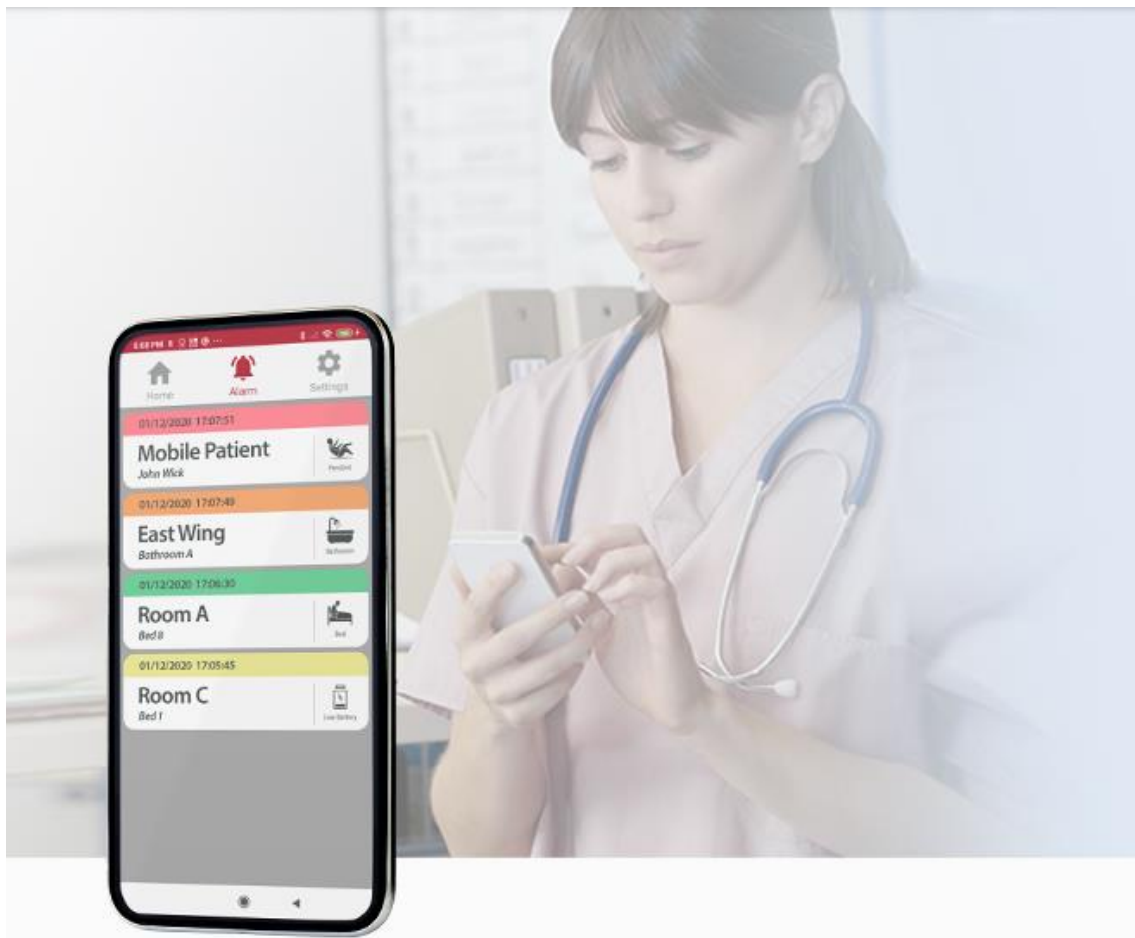

- Omsorgspersoner i disse dager liker ofte å motta og administrere anrop på farten. Nexus-mobilappen gjør det mulig for den enkelte ansatte å motta detaljert alarminformasjon og bekrefte en alarm via en Android-mobiltelefon. Lar omsorgspersonell svare på alarmer raskt og effektivt.

## ILB-21 Rom indikator



- Dobbelfarget indikatorlampe
- Summer med justerbart volum
- Fungerer som signal repeater.
- Lang rekkevidde trådløs signaloverføring til sentral skjerm
- Anti-kollisjonsteknologi "Listen Before Talk"
- " Handshake " signalisering. Bekreftelse av signalet sikrer at anrop mottas pålitelig
- Batteriback-up i tilfelle strømutfall

## WCP-11 Baderoms enhet



- Ring og tilbakestill knappene 2-i-1
- Leveres med avtakbar trekksnor
- IP65 Vanntett
- Utskiftbare batterier

# WCP-11C

## Sengepanel



- Ring og tilbakestill knappene 2-i-1
- Beroligelses-LED
- 4P4C tilkobling for anrops håndsett (NEC-12)
- Utskiftbare batterier



## NEC-12

# Anropsenhet



- Stor rød ringeknapp for enkel tilkalling
- Beroligelses-LED
- Standard kabel med USB snorsikring og 4P4C-kontakt
- Leveres med veggbrakett
- Kompatibel med WCP-11c anropspunkt ved sengen

**NEC-05**

# Portabelt Håndsett



- Stor rød ringeknapp for enkel tilkalling
- Beroligelses-LED
- Grønn knapp for å tilbake stille
- Leveres med nøkkelbånd og veggbrakett for oppbevaring

**TXP-11**

# Smykkesender



- Sender signal til sentralmonitor eller feltmottaker.
- Inkludert med snor med anti-ligatur punkt
- Valgfri klokkerem (ikke inkludert)
- Akselerometer for å utløse anrop i tilfelle pasient fall (anbefales kun for anheng)
- Tilbakestillings signal kan aktiveres ved hjelp av magnetbryter
- Batterilevetid over 3 år ved normal bruk
- Utskiftbart batteri
- Vanntett til IP67

# MBKT-01

## Veggbrakett



- Veggmontert brakett av høy kvalitet skreddersydd for Nexus Master Station
- Side åpen design gir full tilgang til alle porter og knapper
- VESA 75 (75 x 75 mm)
- Valgfritt glidebrakett muliggjør enkel dokking og fjerning.